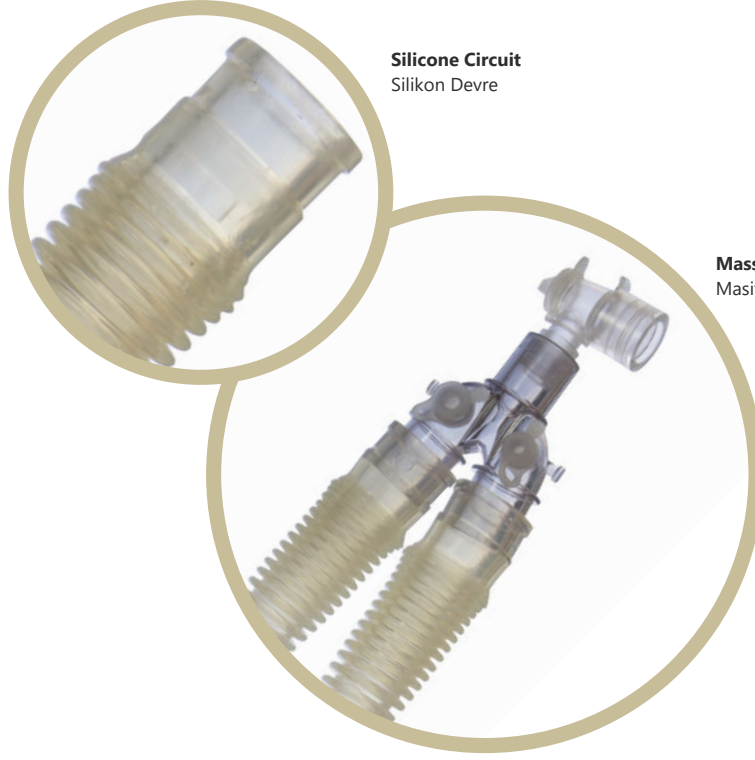


REUSABLE SILICONE ANESTHESIA BREATHING TUBES

ÇOK KULLANIMLIK SİLİKON ANESTEZİ HORTUMLARI

**Silicone Circuit**
Silikon Devre**Massive Connectors**
Masif Konnektör

MORTON REUSABLE BREATHING CIRCUITS

The re-sterilizable Morton Reusable breathing circuits represent an **ideal alternative to reusable rubber circuits**. They are made using the same manufacturing process as the PVC circuits and thus have a smooth bore, which prevents any accumulation of condensed water, and an outer armouring helix which provides flexibility and prevents any accidental flow blockage.

The extremely flexible connectors are welded to the tube, to prevent any risk of disconnection. Silicone circuits can be steam sterilized (**autoclaved**) at **120-134 °C without deterioration**.

Morton Reusable breathing circuits are available in both Ø 22 mm. / Ø 15 mm. / Ø 10 mm. diameter for both adult, pediatric and neonatal applications.

MORTON ÇOK KULLANIMLIK
SOLUNUM DEVRELERİ

Morton, tekrar steril edilebilen **çok kullanımlık solunum devreleri kauçuk devrelere alternatif bir seçenektir**. PVC devrelerin üretim süreciyle aynıdır. Bu sayede iç yüzeyde yoğunlaşmış su birikimini önleyen düz bir yapıya sahipken, dışta ise herhangi bir akışı bloke etmeyi önleyen ve esnek bir yapıya sahip olan izole edilmiş helezon bir yapıdan oluşmaktadır.

Son derece esnek yapıdaki konnektörler bağlantı kopma riskini önlemek için hortuma kaynatılmıştır.

Morton çok kullanımlık Solunum Devreleri **120-134°C arasında herhangi bir bozulma olmadan buhar sterilizasyonunda (otoklavda) steril edilebilmektedir.**

Morton çok kullanımlık solunum devrelerini yetişkin, pediatrik ve yenidoğan uygulamaları için Ø 22 mm. / Ø 15 mm. / Ø 10 mm. çapında modelleri mevcuttur.